

## 耳道式核心体温计 使用说明书

使用本产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

体温受运动、饮食、天气环境的影响，为了正确安全地使用本产品，使用前请仔细阅读本使用说明书或在医务人员的指导下购买和使用。


### 1. 适用范围

本产品是体外测量体核温度最精准的设备，它动态测量和记录人体耳鼓膜温度，适用于运动训练、病人监护、健康监测、疾病预测。

### 2、产品组成



收纳盒

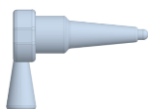

体温计



智能手机

### 3、操作步骤

#### 一安装 APP 软件

TempView 应用程序仅适用于安卓操作系统，请从下列地址下载 APP 应用程序：

- ① <https://www.fmg-tech.com/oid1745038/Software-Download.htm>
- ② <https://www.pgyer.com/tempview>
- ③ 手机扫描二维码，在 Google Play 中下载我们的 App 应用程序 TempView。



#### 一 体温计充电


外接 USB 电源给收纳盒充电，LED 灯亮表示充电中，从收纳盒中取出体温计可连续工作 24 小时。

#### **⚠警告**

- ① 体温计使用后及时放回收纳盒，听见“咔哒”一声，确认盒盖。
- ② 每六个月外接 USB 电源给体温计充电一次，以免体温计损坏。


## 一穿戴体温计

按图示用拇指和食指手持体温计，正反时针旋方向旋转缓慢压入耳道。在体温计扇形柱面上粘贴双面胶纸，可防止体温计滑出耳道，确保体温测量的准确性！

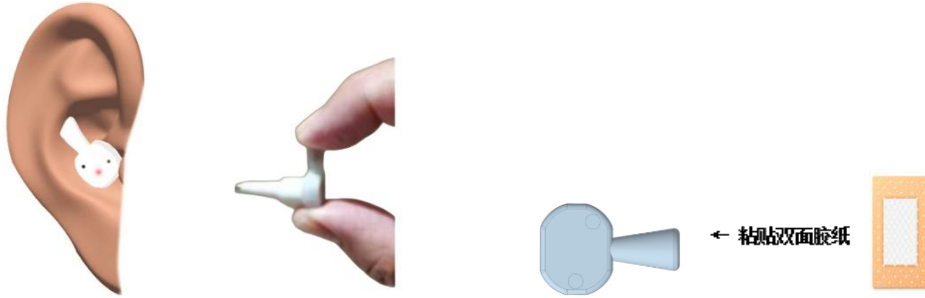

## 4、APP 操作说明

### 一APP 流程图

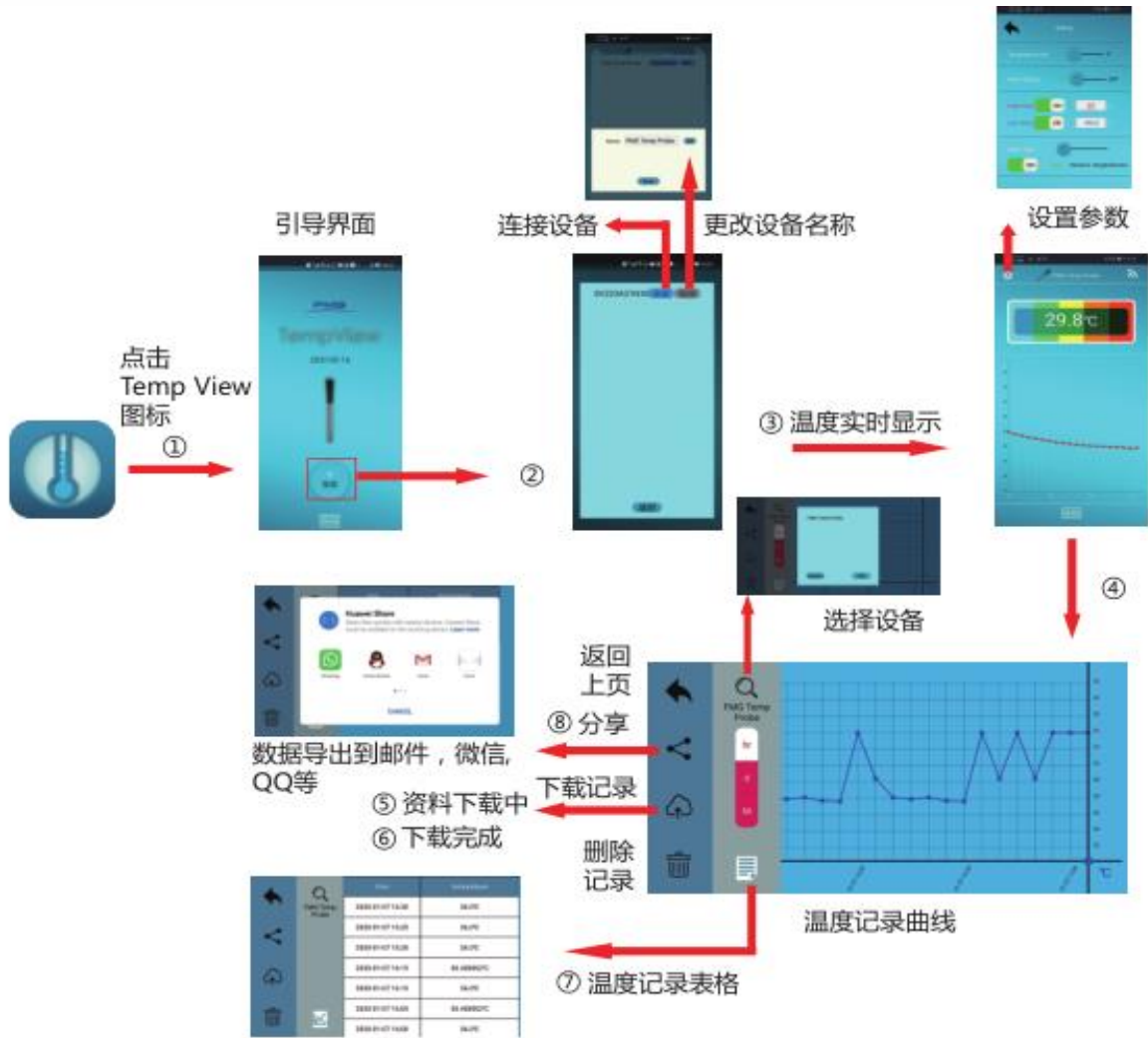

### 一连接和命名体温计



点击搜索



点击连接






点击编辑


### 一显示测量值和曲线



- ① 蓝牙连接状态，点击连接体温计
- ② 设备名称
- ③ 点击进入系统设置
- ④ 当前温度值
- ⑤ 温度曲线
- ⑥ 点击进入历史数据查询
- ⑦ 电池低压指示


### 一下载记录数据

点击右侧  图标，下载记录数据并保存在手机中；点击  图标，查看温度记录曲线和表格；点击  图标，将温度记录表格发送到指定的网络地址（QQ/微信/邮箱/电脑）。


体温计放入收纳盒前，及时下载记录数据，放入收纳盒后记录数据被删除。按动  图标，可删除体温计的历史记录数据。



### 一设置体温计参数

点击屏幕左上角  图标，设置温度单位℃/°F、报警开关、温度报警值。

### 一电池低压显示

当在 APP 屏幕的右上方出现  符号，表示电池低压，请放回收纳盒充电。



## 5、技术参数

产品名称：耳道式核心体温计

产品型号：SV222

通讯协议：BLE5.0

测量部位：人体耳鼓膜

测量周期：10 秒

传输距离： $\geq 10$  米

测量范围：25.0°C~45.0°C

测量误差： $\pm 0.2^\circ\text{C}$

记录间隔：5 分钟

续航时间： $\leq 32$  小时

净重约：1.3g

## 6、警示

- 请勿对本产品进行任何形式的改装。
- 请勿让体温计接触化学溶剂或稀释剂。
- 请勿用力挤压产品，如有外观破损请立即停止使用。
- 本产品不可与核磁共振或 CT 设备共用。
- 本产品严禁在有易燃麻醉气体的环境中使用。
- 请勿使用酸性或碱性清洁剂。
- 使用前后用医用酒精擦拭消毒，然后自然晾干。

## 7、安全注意事项

- 本产品对病人诊断只起辅助作用，请医生结合临床表现和症状做出诊断。
- 请注意本产品的使用温湿度要求，在不满足要求的环境中会造成测量结果不准确。
- 锂电池有一定危险性，用户不得尝试拆卸电池，若强行拆卸或更换电池可能导致爆炸。电池投入火中也可能发出异味，请勿使用。请根据制造商的指示处理使用过的废电池。
- 佩戴本产品时如感不适（不舒服或过敏症状），请立即停止使用并咨询医生。
- 请勿将体温计放入液体中清洁或消毒，禁止液体流入体温计内部。

## 8、维护与保养

- 当 APP 提醒体温计电池电量低时，请及时充电，否则可能无法正常工作。
- 产品及电池在使用寿命末期的处理应符合当地的法律法规要求。
- 机身及感温部件有污垢时，使用干净的软布沾少量水或中性清洁剂擦拭。

## 9、关于菲明格

浏览我们网站 [www.fmg-tech.com](http://www.fmg-tech.com) 了解更多产品，如有任何疑问，请联系我们的客户服务：[sale@fmg-tech.com](mailto:sale@fmg-tech.com)，13689561549。